



Antifaz de Calor Ocular USB

iRelief VEM-100

Confort para sus ojos en cualquier momento o lugar

Concepto

iRelief es un antifaz ocular diseñado para proveer una temperatura confortable a los ojos. Trabaja conectando el antifaz a un puerto de alimentación ya sea a través de una batería, un computador o cualquier otra fuente con puerto USB. Puede aliviar la fatiga o malestar causado por el ojo seco u otros problemas oculares. También puede aumentar la circulación sanguínea alrededor del ojo para mejorar las condiciones de las zonas oscuras.



Temperatura
Ajustable



Diseño 3D
Ergonómico



Alimentado
por USB



Auto apagado



Temperatura variable

A través de sistema Smart Control

iRelief ofrece 3 niveles de temperatura para cubrir las diferentes demandas de alivio. El tiempo de calor aplicado es de 30 minutos para todos sus niveles. Cuando los 30 minutos de confort SPA son alcanzados, el calentamiento se detiene automáticamente. El antifaz se apagará al cabo de una hora continua de funcionamiento.



- 38°C
- 40°C
- 45°C



Diseño 3D de ajuste ocular

El diseño 3D de ajuste ocular mantiene el iRelief en contacto suave y permanente con el área periorbitaria del ojo para aplicar una temperatura homogénea y confortable sin comprimir el globo ocular.


Diseño de conexión Magsafe

iRelieve utiliza la conexión Magsafe tal cual como lo hacen los productos de la marca Apple. Cuando no está conectado a una fuente de energía USB, el antifaz está diseñado y puede ser usado como una máscara normal para dormir.



Materiales especiales de aislación térmica

iRelieve está fabricado con materiales aislantes de temperatura especiales para producir el efecto térmico en condiciones óptimas. Además, el material es lavable, así el usuario puede lavar el producto para una mayor higiene.

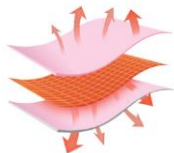

Especificaciones**VEM-100**

Método de calentamiento	Alimentación por conexión USB
Temperatura de calentamiento	38°C , 40°C , 45°C
Duración de ciclo de temperatura	30 minutos
Voltaje y corriente de alimentación	DC 5 V / 1 Amp
Consumo de potencia	2.5 – 4.5 Watts
Material	Algodón, telas combinadas
Colores disponibles	Gris, rosado
Tamaño del producto	220 x 100 mm
Peso	45 gr

Shanghai VisuScience Meditech Co.,Ltd.

Add: No. 344 Sanlin Road, Pudong New Area, Shanghai, China

Tel: +86-21- 34973659 | Fax: +86-21- 34973659

E-mail: info@visuscience.com

Follow us on



www.visuscience.com