


VX 65

Un foróptero
esencial en el que
puede confiar



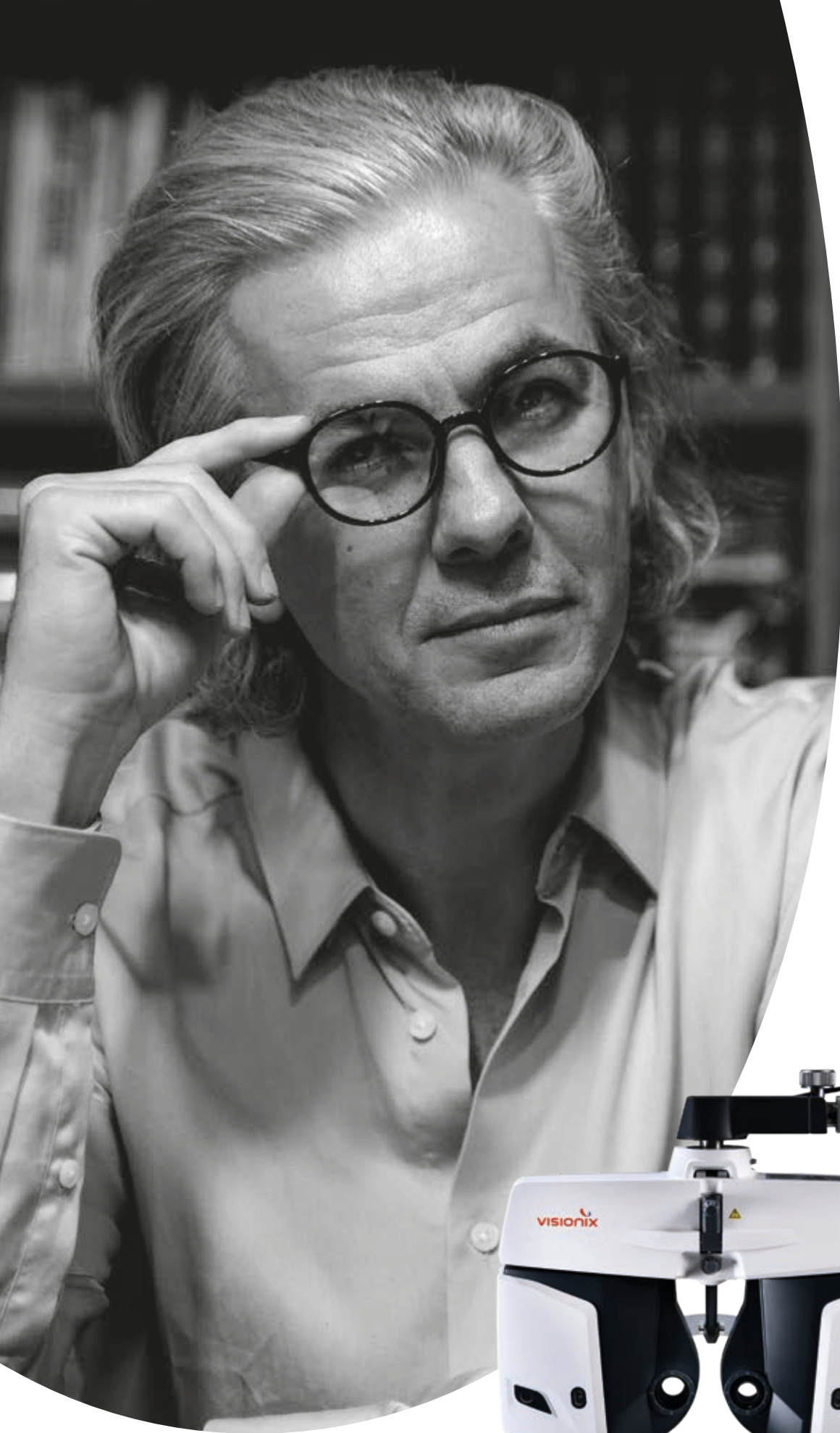

Eficiencia del flujo de trabajo

¿Se ha preguntado alguna vez cuántas refracciones realiza día tras día, durante todo el año? Hemos diseñado el VX 65 para hacer frente a las cargas de trabajo más duras. 20 refracciones al día, 300 días al año durante 10 años. ¡Esto representa mas de 60.000 refracciones! Un foróptero que se adapta a su propio modo de trabajo. Ideal para practicas múltiples: alterne entre el foróptero manual digitalizado o foróptero automático, cada vez que desee. Respaldado por una garantía líder en el sector.

$$\begin{array}{ccccc} 20 & \times & 300 & \times & 10 \\ \text{POR DÍA} & & \text{DÍAS AL AÑO} & & \text{AÑOS} \\ \hline & & & = & 60.000 \\ & & & & \text{REFRACCIONES} \end{array}$$


USO INTENSIVO

Benefíciense de las mejoras tecnológicas de Visionix y experimente un proceso de refracción más preciso y cómodo.

Integrado con equipos Visionix y EMR*

- Completo panel de gestión de datos para gestionar sus datos desde dispositivos externos (EMR/ARK)
- Importe datos de forma inalámbrica desde otros dispositivos (como ARK y lensómetros) a través de VXbox
- Exportación de datos de refracción a su sistema EMR con sólo pulsar un botón

* Electronic medical reports

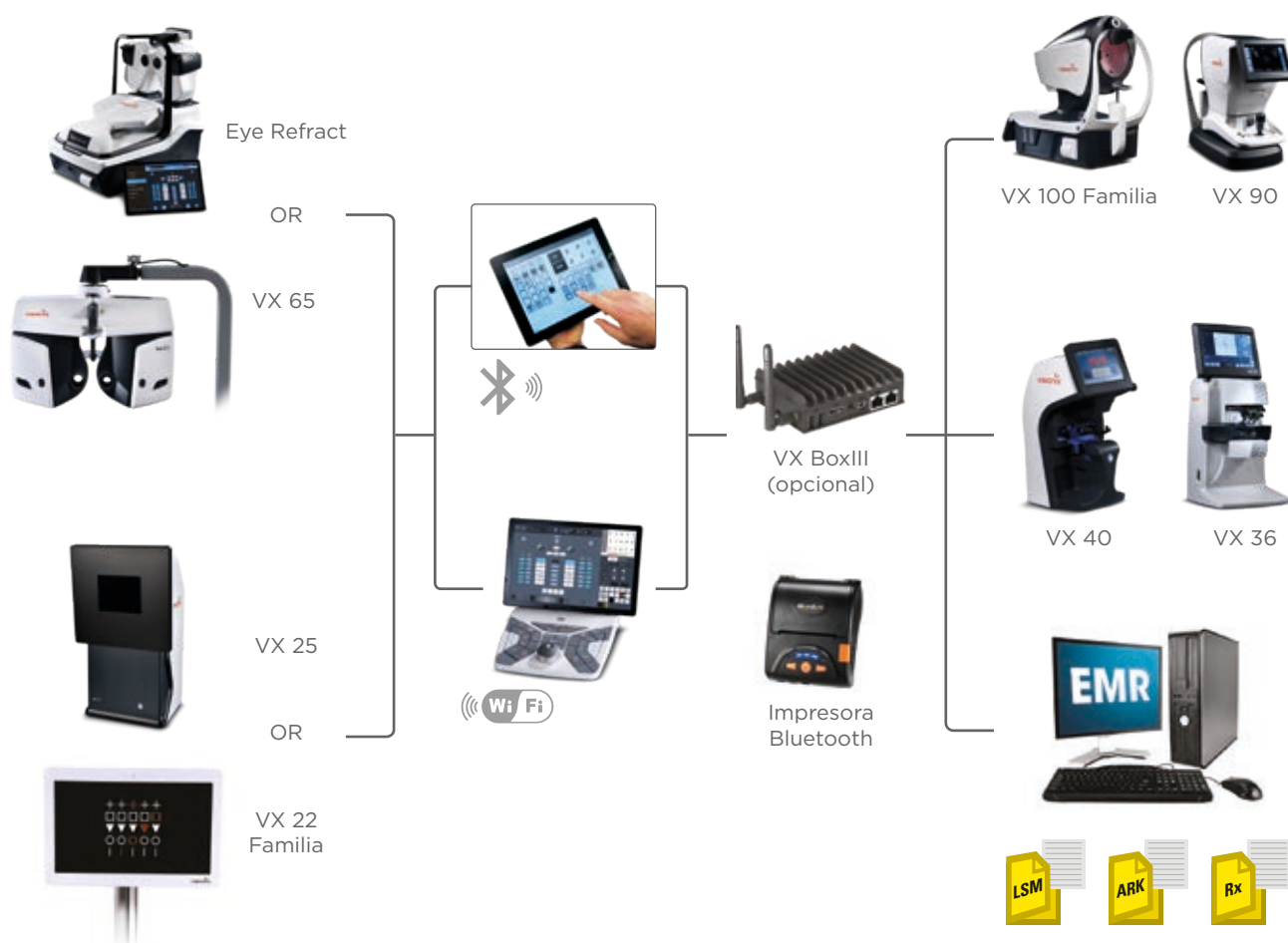

Reduce el tiempo de adopción de los nuevos usuarios

El VX 65 es extremadamente versátil, ya que incluye dos interfaces para los que se inician en la refracción digital y los usuarios avanzados. Se puede elegir entre el modo computerizado o manual digital.

DISPOSITIVO VERSÁTIL 3 EN 1:

Un foróptero que se adapta a su forma de trabajar.

- Ideal para las consultas de varios especialistas: cambie entre el foróptero manual digital y el modo de foróptero automático en cualquier momento
- Controle todo el proceso de refracción con tablet o con un panel de control ergonómico opcional



1

TABLET EN MODO FORÓPTERO MANUAL DIGITAL

Facilitar la transición a un foróptero automático

- Interfaz dedicada a los usuarios de forópteros manuales
- Todas las funcionalidades de un foróptero manual con las ventajas de la automatización



2

TABLET EN MODO FORÓPTERO AUTOMÁTICO

Normalizar y simplificar las experiencias de refracción

- Todas las funcionalidades de un foróptero automático integrado en una tablet inalámbrica
- Personalice su rutina de refracción con hasta 6 programas diferentes de refracción guiada paso a paso con instrucciones claras para cada etapa
- Interfaz sencilla y eficaz



3

PANEL DE CONTROL (OPCIONAL)

Añade controles físicos para una máxima eficiencia y un uso intensivo

- Acceso inmediato a un conjunto de botones esenciales
- La tablet se convierte en una gran pantalla
- El panel de control puede incorporar un soporte opcional

Confíe en su elección

Ingeniería precisa

- Materiales y componentes resistentes para una excelente longevidad
- Piezas mecanizadas con precisión para un funcionamiento suave y silencioso
- Rápidas transiciones de la lente e inicialización de la puesta en marcha

Larga duración

- Mejores componentes para una máxima durabilidad
- Componentes mecánicos probados para soportar 60.000 refracciones durante su vida útil
- Hasta 10 años de uso intensivo

Familia Chart Control VX 25 o VX 22

- Control total, directamente desde la tableta
- Los gráficos y optotipos se muestran en la tablet: vea lo que el paciente está leyendo sin ningún cambio de posición



Grabación / impresión

- Registre e imprima un informe en pdf a través del VXBOXIII
- Imprima un ticket directamente desde la aplicación VX 65 1.2 en una impresora externa Bluetooth

Características técnicas

DIMENSIONES:

ANCHURA	350 mm
PROFUNDIDAD	80 mm
ALTURA	280 mm
PESO	3.8 Kg
VOLTAJE	DC 24 V - 60w
NORMAS	CE

Cumple con la directiva de productos sanitarios EU 2017/745 - Clase I"
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
ISO 15004-1

Lente auxiliar

Lente cilindro cruzado	$\pm 0,25$ D / $\pm 0,50$ D / cilindro cruzado doble con prisma dividido (interfaz automática)
Oclusor	Disponible
Agujero estenopeico	$\varnothing$ 2 mm
Filtro rojo/verde	Ojo derecho: rojo Ojo izquierdo: verde
Filtros polarizadores	Lineal (45° / 135°) / Circular
Lente cilindro cruzado fijo	+0,50 (-1,00) 90°
Lentes esféricas para retinoscopio	+ 1,50 D
Varilla de Maddox roja	Ojo derecho: horizontal Ojo izquierdo: vertical
Prisma	Ojo derecho: 6 Δ BU / Ojo izquierdo: 10 Δ BI
Distancia de refracción para visión cercana	150 mm - 700 mm
Rango de ajuste del soporte frontal	12 mm

Rango de medición

Esfera	• 29,00 a + 26,75 D incremento mín. 0,25 D / 0,50 D / 1,0 D • 19,00 a +16,75 D (cilindro cruzado, prisma)
Cilindro	0 a $\pm 8,75$ D (incremento mín. : 0,25 D)
Eje	0 a 180° incremento mín. 1° / 5° / 10°
DP	50 a 80 mm incremento mín. 0.5mm
Prisma	0 a 20 Δ incremento mín. 0,5 Δ / 1,0 Δ

Tablet en modo foróptero automático

Todas las funcionalidades de un foróptero automático incluidas en un tablet

Personaliza tu rutina de refracción con hasta 6 programas diferentes guiados paso a paso con instrucciones claras en cada fase

REFERENCIAS Y ACCESORIOS



VX 65 + tablet

Ref. 8265-0000-00

Incluye:

- Cabezal del foróptero
- Tablet (Samsung Tab A 2019, Android 9)
- Accesorios (varilla de visión cercana, prueba de visión cercana, protección para mejillas lavable).
- El programa incluye una tablet en modo foróptero manual digital o una tablet en modo foróptero automático.



Control panel (opcional)

Ref. 8265-8001-00

Incluye:

- Control Panel (conexión Bluetooth a la tablet)
- Cargador
- Cable de carga de tablet



VX 22 chart displays (opcional)

VX 22-NP No polarizado

Ref. 8240-0022-00

VX 22-LP Polarización lineal

Ref. 8241-0022-00

VX 22-CP Polarización circular

Ref. 8241-0022-31



VX 65/VX 25 Table

Ref. 8160-0025-00

Arm for VX 65 phoropter

Ref. 8160-5001-18

Soporte del panel de control (opcional)

Ref. 8160-8025-00

Incluye:

- Soporte
 - El cable de alimentación se guarda dentro de la columna para una integración sencilla
- Altura 828 mm x anchura 320 mm x profundidad 359 mm .



VXBOXIII interfaz de comunicación (opcional)

Ref. 8216-1001-03

Permite conectar el VX 65 con el frontofocómetro y el autorrefractómetro y enviar la prescripción final al programa de la HCE.



Impresora externa Bluetooth (opcional)

Ref. 8265-8002-00



VX 25 space saving chart (opcional)

Ref. 8225-0000-00

Esta pantalla ha sido creada para ofrecer resultados óptimos durante la detección previa en la sala de exámenes gracias a su diseño ergonómico, su estilo depurado y una gran variedad de pruebas.



WIFI Dongle (opcional)

ALFA NETWORK AWUS036EAC

Ref. 40010043-00



INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

VISIONIX ESPAÑA, S.A.

Calle Corominas 7 Planta 4 - 08902 Hospitalet de Llobregat - España

Tel. 93 298 07 37

contact-es@visionix.com

www.visionix.com