



All Pupil II

Oftalmoscopio indirecto

El oftalmoscopio indirecto All Pupil II ofrece imágenes nítidas de alto contraste con la óptica Keeler líder en el mundo.



Todas las
lentes Pupil II
LED Volk

All Pupil II LED

- Luz más blanca y brillante para un diagnóstico eficaz
- Ya no es necesario seguir comprando lámparas de repuesto
- El LED tiene una vida útil de aprox. 10.000 h
- 5 años de garantía
- Actualizable ¡Adiós lámpara de xenón, hola LED!



El All Pupil II dispone de iluminación ergonómica ajustable; además de la versión de xenón disponible hasta ahora, actualmente también está disponible en una versión LED innovadora y de alto rendimiento que está marcando la pauta.

Imágenes nítidas y de alto contraste con la óptica Keeler líder en el mundo.

Las gafas Riester All Pupil II utilizan lentes con revestimiento especial y cortadas individualmente con láser para ofrecer la mejor visión, todos los días.

Ligero y cómodo

El oftalmoscopio indirecto de Riester pesa sólo 730 gramos en la versión inalámbrica, incluida la batería de iones de litio de alto rendimiento. También viene equipado con una diadema acolchada especialmente suave y cómoda.

Elementos de mando sencillos

All Pupil II sólo tiene un único control para cambiar el tamaño de apertura y la posición en un solo movimiento para ver a través de todos los tamaños de pupila.

Filtro IR y UV

Un filtro IR y UV está integrado para la mejor protección posible del paciente. Bombilla fácil y rápida sustitución.

Las bombillas de fácil acceso permiten cambiarlas rápidamente para trabajar sin interrupciones.

Sustitución de bombillas fácil y rápida

Bombilla de xenón o LED de fácil acceso para trabajar con el menor número de interrupciones posible.

Extraordinaria intensidad luminosa regulable incluso en las condiciones de examen más difíciles, fácil de ajustar.

¡Por qué tener elementos de mando en la pared cuando el instrumento está en tu cabeza!

Disponible con fijación a la pared y fuente de alimentación conectada por cable para uso estacionario, o como versión móvil con batería de alto rendimiento fijada al cinturón o como versión completamente inalámbrica para una libertad de movimiento absoluta sin compromisos.

Alimentación por cable o inalámbrica

All Pupil II está disponible en varias versiones.

Ya sea con fijación a la pared y fuente de alimentación conectada por cable para uso estacionario, como versión móvil con paquete de baterías de alto rendimiento fijado al cinturón o como versión completamente inalámbrica para una libertad de movimiento absoluta sin compromisos. En esta versión, la batería de iones de litio equilibrada se fija a la parte posterior de la cinta para las cejas.

Para un mayor confort manteniendo el pleno rendimiento de la iluminación.



Distancia pupilar: 47 - 75 mm



Batería portátil para All Pupil II con cable



All Pupil II




inalámbrico All Pupil II con soporte de pared


Difusor gran angular

El difusor gran angular elimina las sombras en el borde del objetivo, lo que amplía considerablemente el campo de visión. El sitio

La luz a través del difusor también es más agradable para el paciente.

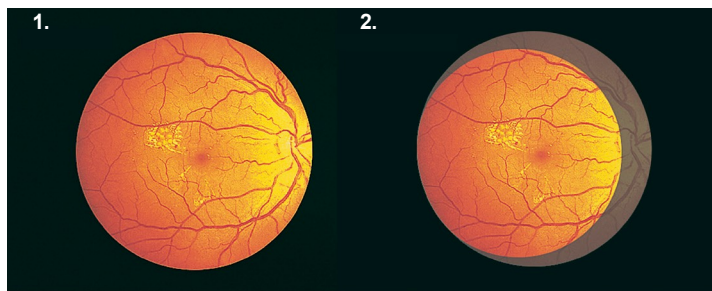

Fondo de ojo con lente Volk (1. con difusor, 2. sin difusor)

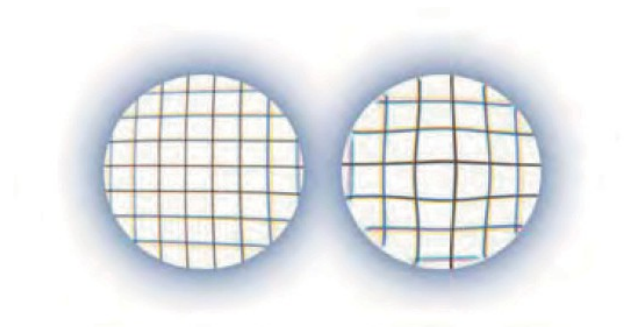

Vista sobre una rejilla de 2 mm a través de una Volk 20D (izquierda) y un objetivo de la competencia (derecha)



La norma para lentes oftalmológicas



Volk 20D



Retina
panorámica®
2.2



Volk 28D

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

All Pupil II	
Nº 3990	All Pupil II inalámbricos con batería de litio y estación de carga
Nº 3990-400	All Pupil II Xenon inalámbrico con filtro azul, Li-ion accu y base de carga, sin difusor
Nº 3991	Todo el cable Pupil II conectado
Nº 3991-400	All Pupil II Xenon cable conectado con filtro azul
Nº 3992	All Pupil II LED inalámbrico con batería de iones de litio, estación de carga
Nº 3992-400	All Pupil II LED inalámbrico con filtro azul, Li-ion accu y base de carga, sin difusor
Nº 3993	Todos los cables LED de Pupil II conectados
Nº 3993-400	Todo el cable LED Pupil II conectado, con filtro azul

Juego All Pupil II	
Nº 3994	Set I All Pupil II LED inalámbrico con Li-ion accu, estación de carga
Nº 3994-400	Set I All Pupil II LED inalámbrico con filtro azul, Li-ion accu y base de carga, sin difusor
Nº 3995	Set I All Pupil II Xenon inalámbrico con Li-ion accu, estación de carga
Nº 3995-400	Set I All Pupil II Xenon inalámbrico con filtro azul, Li-ion accu y base de carga, sin difusor
Nº 3996	Set II All Pupil II Cable de xenón conectado con batería portátil
Nº 3996-400	Set II All Pupil II Xenon cable conectado con filtro azul, batería portátil, sin difusor
Nº 3997	Conjunto III Todos los Pupil II Cable de xenón conectado con fijación mural fija
Nº 3997-400	Set III All Pupil II Xenon cable conectado con filtro azul, montaje en pared, sin difusor
Nº 3998	Set II Todo el cable LED Pupil II conectado con la batería portátil
Nº 3998-400	Set II Todo el cable LED Pupil II conectado con filtro azul, batería portátil, sin difusor
Nº 3999	Conjunto III Todo el cable Pupil II conectado con fijación mural fija
Nº 3999-400	Set III All Pupil II LED con cable, filtro azul

Accesorios	
Nº 12779	LED para All Pupil II
Nº 12780	Batería portátil para All Pupil II conectada por cable
Nº 12781	Fijación mural fija para cable conectado All Pupil II
Nº 12782	Todos los Pupil II teaching Mirror
Nº 12783	Todas las bombillas Pupil II XL (paquete de 2 uds.)
Nº 12784	Depresor grande para All Pupil II
Nº 12785	Depresor pequeño para All Pupil II
Nº 12786	Fondo de ojo para All Pupil II
Nº 12787	Bolsa de transporte para All Pupil II
Nº 12944	Carril de montaje para barra de cejas

Para más información, visite riester.de



Rudolf Riester GmbH P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | 72417 Jungingen | Alemania
Tel.: (+49) 7477-9270-0 | Fax.: (+49) 7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

