

ri-scope® L

Alto rendimiento para toda la vida

El ri-scope® L: instrumentos de diagnóstico LED portátiles de primera calidad



ri-scope® L Otoscopio

Otoscopios premium con óptica de vidrio y tecnología LED / Li-ion



ri-scope® L2

El modelo económico con iluminación LED de fibra óptica de 2,5 V / 3,5 V, con una duración de hasta 100.000 horas (sin dispositivo de expulsión de espéculos SpecEjec)

- Cristal óptico giratorio bidireccional con aumento de 3x, lente de operación opcional con aumento de 4x disponible para su compra
- Acoplamiento metálico para espéculos **e-scope®** / **ri-mini®**, compatible con espéculos de otros fabricantes reconocidos
- Con iluminador de garganta integrado por fibra óptica
- Adecuado para otoscopia neumática (se suministra sin pera neumática)
- Amplia selección de fuentes de alimentación: mangos prácticos y estables, cargadores funcionales y estaciones de diagnóstico bien diseñadas


ri-scope® L3

La versión de gama alta con iluminación LED de fibra óptica de 2,5 V / 3,5 V, con una duración de hasta 100.000 horas, dispositivo de expulsión de espéculos SpecEjec y lente de operación

- Fibra óptica para una transmisión óptima de la luz
- Cristal óptico giratorio bidireccional con aumento de 3x
- Incluye lente de operación con aumento de 4x y mini óptica de vidrio para facilitar la inserción de instrumentos
- Con iluminador de garganta integrado por fibra óptica
- Dispositivo SpecEjec para expulsión de espéculos, fácil de usar, ubicado en la parte posterior del otoscopio para reducir la contaminación cruzada
- Acoplamiento para espéculos **ri-scope®** y conducto ampliado para instrumentos
- Adecuado para otoscopia neumática (se suministra sin pera neumática)
- Amplia selección de fuentes de alimentación: mangos prácticos y estables, cargadores funcionales y estaciones de diagnóstico bien diseñadas



Cabezal de otoscopio con lente de operación

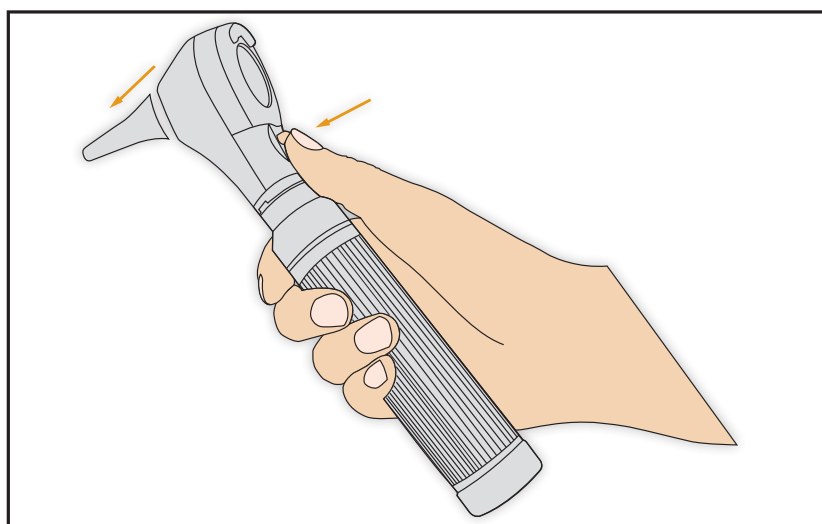

El dispositivo SpecEjec permite la expulsión sin contacto de los espéculos auriculares usados para un manejo higiénico y simplificado

Cabezal de otoscopio ri-scope® L

10582*	ri-scope® L2 cabezal de otoscopio, LED 2,5 V	10583*	ri-scope® L3 cabezal de otoscopio, LED 2,5 V
10565	ri-scope® L2 cabezal de otoscopio, LED 3,5 V	10567	ri-scope® L3 cabezal de otoscopio, LED 3,5 V
10565-301	ri-scope® L2 cabezal de otoscopio, LED 3,5 V con sistema antirrobo	10567-301	ri-scope® L3 cabezal de otoscopio, LED 3,5 V con sistema antirrobo

*Compatible únicamente con pilas alcalinas y con el mango **ri-scope® L** (10670 – se vende por separado). No apto para baterías recargables ni para uso con **ri-former®**.

ri-scope® L Oftalmoscopio

Oftalmoscopio coaxial de clase premium con óptica de alto rendimiento reconocida y tecnología LED / Li-ion




ri-scope® L2


Todas las funciones básicas importantes con filtros rojo-libre, azul y de polarización que se pueden activar por separado para cada apertura.

- Rueda de dioptrías con 29 lentes correctivas **Plus** 1-10, 12, 15, 20, 40 **Minus** 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Rueda de aperturas fácil de usar con hendidura, estrella de fijación, semicírculo y círculos pequeños, medianos y grandes
- Incluye rueda de filtros activable para todas las aperturas con visualización de símbolos, filtro rojo-libre, filtro azul y filtro de polarización
- Óptica optimizada de alto rendimiento con lente condensadora esférica
- Trayectoria de haz paralelo
- A prueba de polvo
- Amplia selección de fuentes de alimentación: mangos prácticos y estables, cargadores funcionales y estaciones de diagnóstico bien diseñadas

Aperturas L2

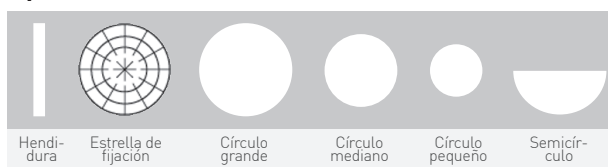

Filtros

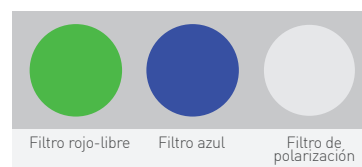


ri-scope® L3


The maximized model with additional focussing device and 89 single-step dioptre values.

- Rueda de dioptrías con 89 valores correctivos **Plus** 1-45 en pasos individuales, **Minus** 1-44 en pasos individuales
- Rueda de aperturas fácil de usar con cuadrícula, hendidura, estrella de fijación, semicírculo y círculos pequeños, medianos y grandes
- Incluye rueda de filtros activable para todas las aperturas con visualización de símbolos, filtro rojo-libre, filtro azul y filtro de polarización
- Dispositivo de enfoque con fuerza de retención cero para la rápida corrección de ametropías
- A prueba de polvo
- Amplia selección de fuentes de alimentación: mangos prácticos y estables, cargadores funcionales y estaciones de diagnóstico bien diseñadas

Aperturas L3

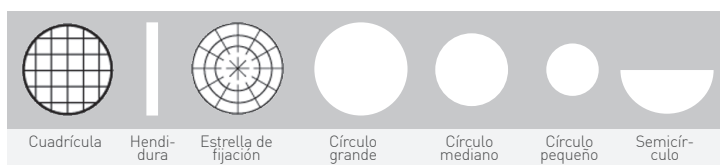

Filters

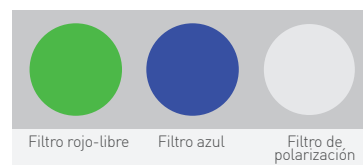

Cabezal de oftalmoscopio

Cabezal de oftalmoscopio ri-scope® L

10597*	ri-scope® L2 cabezal de oftalmoscopio, LED 2,5 V	10598*	ri-scope® L3 cabezal de oftalmoscopio, LED 2,5 V
10571-203	ri-scope® L2 cabezal de oftalmoscopio, LED 3,5 V	10573-203	ri-scope® L3 cabezal de oftalmoscopio, LED 3,5 V
10595-301	ri-scope® L2 cabezal de oftalmoscopio, LED 3,5 V con sistema antirrobo	10596-301	ri-scope® L3 cabezal de oftalmoscopio, LED 3,5 V con sistema antirrobo

*Compatible únicamente con pilas alcalinas y con el mango **ri-scope® L** (10670 – se vende por separado). No apto para baterías recargables ni para uso con **ri-former®**.

CABEZAL DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO

Los instrumentos de diagnóstico **Riester** están diseñados para ofrecer precisión, fiabilidad y comodidad. Con tecnología LED avanzada de 3,5 V y una vida útil de hasta 100.000 horas, proporcionan una iluminación fría, similar a la luz del día, mediante conductores de luz de fibra óptica de alta calidad. Cada instrumento cuenta con carcasas ergonómicas y duraderas —desde plásticos resistentes a impactos hasta metal cromado— y ofrece acoplamientos de bayoneta rápidos y seguros, además de un fácil reemplazo de lámparas. Ya sea para examinar piel, garganta o fosas nasales, estas herramientas garantizan una visibilidad óptima y una experiencia clínica fluida.



EliteVue Macro Otoscopio

- Más de 5x aumentos
- Vista completa de la membrana timpánica
- Óptica de vidrio de alto rendimiento optimizada para reducir reflejos
- Rueda para ajustar la profundidad focal
- Dispositivo SpecEjec para expulsión de espéculos, fácil de usar, ubicado en la parte posterior del otoscopio para reducir la contaminación cruzada

10510* Cabezal **EliteVue**, LED 2,5 V

10512 Cabezal **EliteVue**, LED 3,5 V

10512-301 Cabezal **EliteVue**, LED 3,5 V con sistema antirrobo



ri-derma Dermatoscopio

- 10x aumentos con lente acromática de enfoque
- Dos placas de contacto dermatológicamente seguras disponibles:
 - Con escala (0 – 10 mm) para medición precisa de lesiones pigmentadas
 - Sin escala
- Carcasa metálica estable con acabado en cromo negro, a prueba de polvo
- Protección práctica para gafas

10577 Cabezal dermatoscopio **ri-scope® ri-derma**, LED 3,5 V

10577-301 Cabezal dermatoscopio **ri-scope® ri-derma**, LED 3,5 V con sistema antirrobo



Portaespátulas linguales F.O.

- Sistema deslizante para fijación segura de depresores linguales de madera
- Carcasa robusta y ligera de plástico ABS

10574 Portaespátulas linguales F.O. **ri-scope®**, LED 3,5 V

10574-301 Portaespátulas linguales F.O. **ri-scope®**, LED 3,5 V con sistema antirrobo



Espéculo nasal F.O.

- Lente giratoria y extraíble con aumento de 2,5x
- Expansión controlada mediante tornillo regulador; expansión rápida presionando hacia abajo
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, resistente a impactos

10575 Espéculo nasal F.O. **ri-scope®**, LED 3,5 V

10575-301 Espéculo nasal F.O. **ri-scope®**, LED 3,5 V con sistema antirrobo



Conductor de luz F.O.

- Iluminación óptima de las áreas de garganta y laringe
- Construcción en metal cromado para mayor durabilidad

10576 Conductor de luz F.O. **ri-scope®**, LED 3,5 V

10576-301 Conductor de luz F.O. **ri-scope®**, LED 3,5 V con sistema antirrobo

*Compatible únicamente con pilas alcalinas y con el mango **ri-scope® L (10670)** – se vende por separado). No apto para baterías recargables ni para uso con **ri-former®**.

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO MODULAR

Estación de diagnóstico con diseño flexible y modular

ri-former® – una estación de diagnóstico modular que ofrece flexibilidad para hospitales y consultorios médicos. Los módulos de diagnóstico pueden combinarse individualmente para adaptarse a la especialidad y ubicación del profesional. La estación de diagnóstico **ri-former®** presenta ventajas destacadas en cuanto a sus configuraciones versátiles.

Con su fuente de alimentación centralizada, el **ri-former®** proporciona la fiabilidad necesaria para satisfacer las exigencias del entorno dinámico y acelerado de hospitales y consultorios médicos.

Módulos de presión arterial

- Monitor de presión arterial totalmente automatizado, de grado clínico [**RBP-100**]
- Esfigmomanómetro aneroide manual, de gran escala y grado clínico [**big ben®**]

Módulos de termometría


- Termómetro timpánico por infrarrojos [**ri-thermo® tymPRO**]
- Termómetro por infrarrojos sin contacto, de grado clínico [**ri-thermo® sensioPRO**]
- Termómetro predictivo oral / axilar / rectal [**RPT-100**]

Cabezas de instrumentos

- Los sistemas de diagnóstico **ri-former®** de **Riester** admiten hasta tres mangos, cada uno compatible con seis cabezas intercambiables: otoscopio, oftalmoscopio, dermatoscopio, soporte para depresores linguales, espéculo nasal o conductor de luz.
- Los mangos de diagnóstico están disponibles con una selección de cabezas de instrumentos **Riester ri-scope®** L y **EliteVue** con iluminación LED, que ofrecen hasta 100.000 horas de duración.

Accesorios

- Dispensador integrado de espéculos **ri-spec** – para espéculos auriculares y nasales, elija entre cinco embudos para cinco tamaños diferentes de espéculos. Esto permite utilizar un espéculo nuevo en cada exploración y es fácil de rellenar y desinfectar.
- Módulo de extensión – para un mango adicional

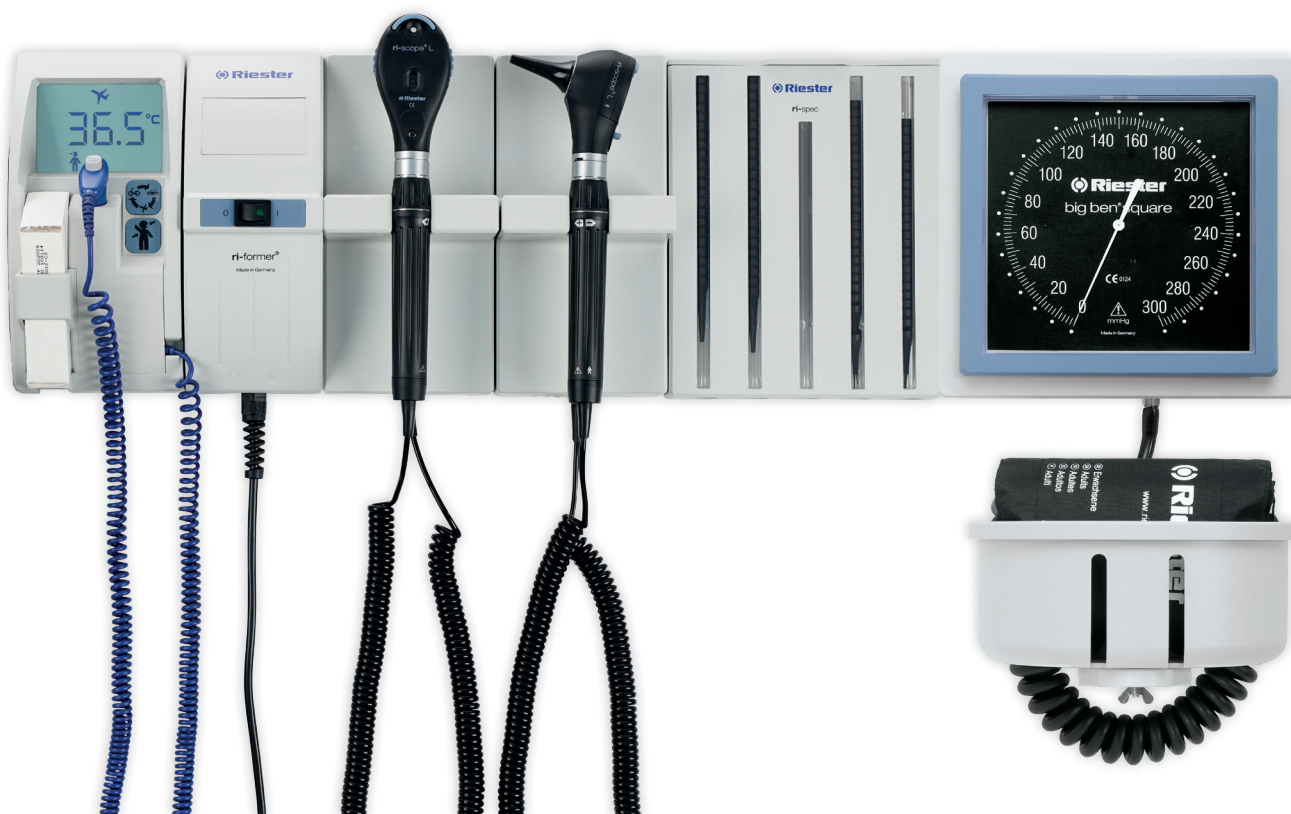

Para cabezales de instrumentos **ri-former®** con opción de dispositivo antirrobo, consulte las páginas 2 – 4.
Para todas las demás opciones, consulte el folleto independiente de **ri-former®**.

CONJUNTOS DE INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO

ri-scope® L Juego de Otoscopio

- Cabezal de otoscopio **ri-scope® L**
- Mango para pilas tipo C (pilas no incluidas)
- Un tubo que contiene 10 espéculos auriculares desechables en tamaños surtidos de 2 mm a 5 mm
- Lente de operación con aumento de 4× (incluida solo en el set L3)
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad



3703	ri-scope® L2 otoscopio, LED 2,5 V / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 ri-accu®
3704	ri-scope® L3 otoscopio, LED 2,5 V / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 ri-accu®
3703-550	ri-scope® L2 otoscopio, LED 3,5 V / Mango para pilas tipo C para 1 ri-accu® L
3704-550	ri-scope® L3 otoscopio, LED 3,5 V / Mango para pilas tipo C para 1 ri-accu® L



ri-scope® L Juego de Oftalmoscopio

- Cabezal de oftalmoscopio **ri-scope® L**
- Mango para pilas tipo C (pilas no incluidas)
- Lupa independiente con aumento de 5×
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad

3725-203	ri-scope® L2 oftalmoscopio, LED 2,5 V / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 ri-accu®
3726-203	ri-scope® L3 oftalmoscopio, LED 2,5 V / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 ri-accu®
3811-203	ri-scope® L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Mango para pilas tipo C para 1 ri-accu® L
3812-203	ri-scope® L3 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Mango para pilas tipo C para 1 ri-accu® L

ri-scope® L Juego de Otoscopio / Oftalmoscopio

- Cabezal de otoscopio y oftalmoscopio **ri-scope® L**
- Mango para pilas tipo C (pilas no incluidas)
- Un tubo que contiene 10 espéculos auriculares desechables en tamaños surtidos de 2 mm a 5 mm
- Lente de operación con aumento de 4× (incluida solo en el set L3)
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad



3746.013	ri-scope® L2 oto-, LED 2,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 2,5 V / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 ri-accu®
3726-203	ri-scope® L3 oto-, LED 2,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 2,5 V / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 ri-accu®
3817-203	ri-scope® L3 oto-, LED 3,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Mango para pilas tipo C para 1 ri-accu® L



ENT Kit

Un set de diagnóstico premium que combina el otoscopio y el oftalmoscopio **ri-scope® L2**, ambos equipados con iluminación LED de alto rendimiento de 3,5 V para exámenes precisos y fiables.

- **ri-scope® L2** otoscopio y oftalmoscopio (LED 3,5 V)
- Mango con batería recargable de iones de litio y puerto USB tipo C
- Cable de carga USB-C a USB-A, adaptador de carga y adaptador de enchufe intercambiable
- Un tubo que contiene 10 espéculos auriculares desechables en tamaños surtidos de 2 mm a 5 mm
- Estuche resistente con cremallera para almacenamiento seguro y fácil transporte

3832	ri-scope® L2 oto-, LED 3,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Mango con batería tipo USB-C y batería de iones de litio, adaptador de enchufe para EE.UU.
3833	ri-scope® L2 oto-, LED 3,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Mango con batería USB tipo C y batería de iones de litio, adaptador de enchufe para la UE
3834	ri-scope® L2 oto-, LED 3,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Mango con batería USB tipo C y batería de iones de litio, adaptador de enchufe para el Reino Unido
3835	ri-scope® L2 oto-, LED 3,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Mango con batería USB tipo C y batería de iones de litio, adaptador de enchufe para Australia

Juego de otoscopio EliteVue / oftalmoscopio ri-scope® L

- Cabezal de otoscopio **EliteVue** y cabezal de oftalmoscopio **ri-scope® L2**
- Mango para pilas tipo C (pilas incluidas o excluidas según el set)
- Un tubo que contiene 10 espéculos auriculares desechables en tamaños surtidos de 2 mm a 5 mm
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad



2210-204	EliteVue otoscopio / ri-scope® L2 oftalmoscopio, LED 2,5 V / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 ri-accu®
2210-203	EliteVue otoscopio / ri-scope® L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Mango para pilas tipo C para 1 ri-accu® L
2212-203	EliteVue otoscopio / ri-scope® L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / 2 mangos para pilas tipo C / 2 ri-accu® L / ri-charger® L



ri-scope® E.N.T.

- Cabezal de otoscopio **ri-scope® L**, espéculo nasal con fibra óptica **ri-scope® F.O.** y soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.**
- Mango para pilas tipo C (pilas no incluidas)
- Un tubo que contiene 10 espéculos auriculares desechables en tamaños surtidos de 2 mm a 5 mm
- Lente de operación con aumento de 4×
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad

3760	ri-scope® L3 otoscopio, LED 2,5 V / espéculo nasal con fibra óptica ri-scope® F.O. / soporte para depresor lingual con fibra óptica ri-scope® F.O. / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 ri-accu®
3760-550	ri-scope® L3 otoscopio, LED 3,5 V / espéculo nasal con fibra óptica ri-scope® F.O. / soporte para depresor lingual con fibra óptica ri-scope® F.O. / Mango para pilas tipo C para 1 ri-accu® L

ri-scope® L perfect

- Cabezal de otoscopio **ri-scope® L**, cabezal de oftalmoscopio y soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.**
- Mango para pilas tipo C (pilas no incluidas)
- Un tubo que contiene 10 espéculos auriculares desechables en tamaños surtidos de 2 mm a 5 mm
- Lente de operación con aumento de 4x
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad



3754 ri-scope® L3 Oto-, LED 2,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 2,5 V / Soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 **ri-accu®**

3819-203 ri-scope® L3 oto-, LED 3,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / Soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / Mango para pilas tipo C para 1 **ri-accu® L**

ri-scope® L praktikant

- Cabezal de otoscopio **ri-scope® L**, espéculo nasal con fibra óptica **ri-scope® F.O.**, soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.** y conductor de luz con fibra óptica **ri-scope® F.O.**
- Mango para pilas tipo C (pilas no incluidas)
- Un tubo que contiene 10 espéculos auriculares desechables en tamaños surtidos de 2 mm a 5 mm
- Lente de operación con aumento de 4x
- Dos espejos laríngeos N° 3 y N° 4
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad



3766 ri-scope® L3 otoscopio, LED 2,5 V / espéculo nasal con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / conductor de luz con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 **ri-accu®**

3766-550 ri-scope® L3 otoscopio, LED 3,5 V / espéculo nasal con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / conductor de luz con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / Mango para pilas tipo C para 1 **ri-accu® L**

ri-scope® L de luxe

- Cabezal de otoscopio **ri-scope® L**, cabezal de oftalmoscopio, espéculo nasal con fibra óptica **ri-scope® F.O.**, soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.** y conductor de luz con fibra óptica **ri-scope® F.O.**
- Mango para pilas tipo C (pilas no incluidas)
- Un tubo que contiene 10 espéculos auriculares desechables en tamaños surtidos de 2 mm a 5 mm
- Dos espejos laríngeos N° 3 y N° 4
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad



3772 ri-scope® L3 oto-, LED 2,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 2,5 V / espéculo nasal con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / conductor de luz con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 **ri-accu®**

3820-203 ri-scope® L3 oto-, LED 3,5 V / L2 oftalmoscopio, LED 3,5 V / espéculo nasal con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / soporte para depresor lingual con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / conductor de luz con fibra óptica **ri-scope® F.O.** / Mango para pilas tipo C para 1 **ri-accu® L**

ri-scope® ri-derma dermatoscopio

- Cabezal de dermatoscopio **ri-scope® L ri-derma**
- Mango para pilas tipo C (pilas no incluidas)
- Dos placas de contacto: una con escala y otra sin escala
- Estuche rígido de lujo con cierre de seguridad



3777 ri-scope® ri-derma dermatoscopio LED 2,5 V / Mango para pilas tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 **ri-accu®**

3777-550 ri-scope® ri-derma dermatoscopio LED 3,5 V / Mango para pilas tipo C para 1 **ri-accu® L**

MANGO

Mango para pilas tipo C



- Equipado con la tecnología de ajuste electrónico de luz rheotronic®: simplemente gire el anillo de control en sentido horario o antihorario para un control de brillo suave y preciso, adaptado a la preferencia del profesional.
- Construcción sólida de metal con acabado en cromo negro para mayor durabilidad y aspecto premium
- Práctico sistema de acoplamiento tipo bayoneta para cambios rápidos y seguros de cabezales
- Compatible con cabezales de instrumentos **ri-scope®** de 3,5 V y 2,5 V
- Funciona con 2 pilas alcalinas tipo C o 1 batería recargable **ri-accu®** / **ri-accu® L**
- Carga sencilla mediante **cargador enchufable** (con **ri-accu® L [10694]**) o **base de carga (ri-charger® L con ri-accu® L [10691]** o **ri-charger® con ri-accu® [10681]**)
- Fácil sustitución de la batería en la base del mango
- Diámetro del mango: 28 mm
- Se suministra sin pilas

10670 Mango para pilas tipo C con tecnología rheotronic®, cromado, para 2 pilas alcalinas tipo C o 1 **ri-accu®** / **ri-accu® L**

OPCIONES DE CARGA

Base de carga



- **ri-charger® L** (modelo blanco): Para todos los mangos recargables con baterías de iones de litio, 3,5 V
- **ri-charger®** (modelo negro): Para todos los mangos recargables con baterías NiMH, 2,5 V y 3,5 V
- Disponible como unidad de sobremesa o para montaje en pared
- Incluye un práctico compartimento para almacenar dos lámparas de repuesto y espéculos auriculares
- Estado de carga mostrado en el dispositivo
 - Amarillo: carga en curso
 - Verde: carga completada

10705	ri-charger® L 3,5 V, soporte mural con adaptador para la UE	10700	ri-charger® 2,5 V / 3,5 V, soporte mural con adaptador para la UE
10705.001	ri-charger® L 3,5 V, soporte mural con adaptador para el Reino Unido	10701.001	ri-charger® 2,5 V / 3,5 V, soporte mural con adaptador para el Reino Unido
10705.002	ri-charger® L 3,5 V, soporte mural con adaptador para Australia	10700.006	ri-charger® 2,5 V / 3,5 V, soporte mural con adaptador para Australia
10706	ri-charger® L 3,5 V, soporte mural con adaptador para EE.UU.	10701	ri-charger® 2,5 V / 3,5 V, soporte mural con adaptador para EE.UU.

Accesorios

10713	Cubierta del compartimento para espéculos auriculares para ri-charger® L	10712	Cubierta del compartimento para espéculos auriculares para ri-charger®
10710	Soporte mural para ri-charger® / ri-charger® L , con tornillos y tacos		



Plug-in charger

- Funciona con batería recargable Li-ion **ri-accu® L [10694]** de 3,5 V
- Hasta 9 horas de tiempo de funcionamiento (LED) con carga completa
- Tecnología de carga más reciente: tiempo de carga inferior a 3 horas
- Cargador de enchufe de rango amplio (120 – 240 V) con opciones de enchufe regional disponibles bajo solicitud

10707	Cargador de enchufe para batería recargable Li-ion 3,5 V ri-accu® L [10694] para mango de batería tipo C, sin batería, enchufe UE
10708	Cargador de enchufe para batería recargable Li-ion 3,5 V ri-accu® L [10694] para mango de batería tipo C, con batería, enchufe UE
10708.002	Cargador de enchufe para batería recargable Li-ion 3,5 V ri-accu® L [10694] para mango de batería tipo C, con batería, enchufe US



Mango USB-C

- Mayor capacidad – hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento
- Indicador del estado de la batería en el mango (LED bicolor muestra: completamente cargado, cargando o requiere carga)
- Tecnología de carga universal USB Tipo-C
- Cargador enchufable de amplio rango (120 – 240 V) con opciones de enchufe regional disponibles bajo solicitud
- Carga completa en aproximadamente 3,5 horas
- Estado de carga
 - Verde: Batería completamente cargada
 - Verde intermitente: Batería en carga
 - Naranja: Batería críticamente baja – requiere carga

10704	Mango de batería USB Tipo C, 3,5 V con batería recargable de ion-litio, cable de carga, adaptador de carga y adaptador de enchufe UE
10704.001	Mango de batería USB Tipo C, 3,5 V con batería recargable de ion-litio, cable de carga, adaptador de carga y adaptador de enchufe AU
10704.002	Mango de batería USB Tipo C, 3,5 V con batería recargable de ion-litio, cable de carga, adaptador de carga y adaptador de enchufe UK
10704.003	Mango de batería USB Tipo C, 3,5 V con batería recargable de ion-litio, cable de carga, adaptador de carga y adaptador de enchufe US

BATERÍAS

10691	ri-accu® L batería recargable de ion-litio Tipo C, 3,5 V para mango de batería Tipo C y ri-charger® L
10694	ri-accu® L batería recargable de ion-litio Tipo C, 3,5 V para mango de batería Tipo C y cargador enchufable
10681	ri-accu® batería recargable NIMH Tipo C, 2,5 V para mango de batería Tipo C
10699	ri-accu® USB batería recargable de ion-litio Tipo C, 3,5 V para mango de batería Tipo C
10686	Batería alcalina Tipo C 1,5 V, paquete de 2 piezas

LÁMPARAS

LED 2,5 V



- Para **ri-scope®** otoscopio L2 / L3
- El paquete contiene 1 unidad

10626 Lámpara LED 2,5 V, 1 unidad

LED 2,5 V



- Para **ri-scope®** oftalmoscopio L2 / L3
- El paquete contiene 1 unidad

10624 Lámpara LED 2,5 V, 1 unidad

LED 3,5 V



- Para **ri-scope®** otoscopio L2 / L3, conductor de luz, espéculo nasal y soporte para depresor lingual
- El paquete contiene 1 unidad

10625 Lámpara LED 3,5 V, 1 unidad

LED 3,5 V



- Para **ri-scope®** oftalmoscopio L2 / L3
- El paquete contiene 1 unidad

10627 Lámpara LED 3,5 V, 1 unidad

ESPÉCULOS



Espéculos reutilizables para L2

- Disponibles en tamaños: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm
- Fabricados en plástico negro, cada espéculo claramente marcado por tamaño
- Suministrados en bolsa de polietileno

10775	Espéculos auriculares reutilizables Ø 2,0 mm, paquete de 10 unidades	10779	Espéculos auriculares reutilizables Ø 2,5 mm, paquete de 10 unidades
10783	Espéculos auriculares reutilizables Ø 3,0 mm, paquete de 10 unidades	10789	Espéculos auriculares reutilizables Ø 4,0 mm, paquete de 10 unidades
10795	Espéculos auriculares reutilizables Ø 5,0 mm, paquete de 10 unidades		



Espéculos desechables para L2

- Para un solo uso: una opción higiénica para prevenir la contaminación cruzada
- Fabricados en plástico negro, cada espéculo claramente marcado por tamaño
- Suministrados en bolsa de polietileno

10772-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 100 unidades	10773-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 500 unidades
10774-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 1000 unidades	10772-531 Espéculos auriculares desechables Ø 2,5 mm, paquete de 100 unidades
10773-531 Espéculos auriculares desechables Ø 2,5 mm, paquete de 500 unidades	10774-531 Espéculos auriculares desechables Ø 2,5 mm, paquete de 1000 unidades
10772-533 Espéculos auriculares desechables Ø 3,0 mm, paquete de 100 unidades	10773-533 Espéculos auriculares desechables Ø 3,0 mm, paquete de 500 unidades
10774-533 Espéculos auriculares desechables Ø 3,0 mm, paquete de 1000 unidades	10772-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 100 unidades
10773-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 500 unidades	10774-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 1000 unidades
10772-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 100 unidades	10773-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 500 unidades
10774-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 1000 unidades	
14061-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 100 unidades	14062-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 500 unidades
14063-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 1000 unidades	14061-531 Espéculos auriculares desechables Ø 2,5 mm, paquete de 100 unidades
14062-531 Espéculos auriculares desechables Ø 2,5 mm, paquete de 500 unidades	14063-531 Espéculos auriculares desechables Ø 2,5 mm, paquete de 1000 unidades
14061-533 Espéculos auriculares desechables Ø 3,0 mm, paquete de 100 unidades	14062-533 Espéculos auriculares desechables Ø 3,0 mm, paquete de 500 unidades
14063-533 Espéculos auriculares desechables Ø 3,0 mm, paquete de 1000 unidades	14061-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 100 unidades
14062-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 500 unidades	14063-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 1000 unidades
14061-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 100 unidades	14062-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 500 unidades
14063-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 1000 unidades	



Espéculos reutilizables para L3

- Especialmente desarrollado para su uso con la opción SpecEjec, manejo absolutamente fiable
- Disponible en tamaños: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 9 mm
- El espéculo de 9 mm es adecuado para uso como espéculo nasal
- Fabricados en plástico negro, cada espéculo claramente marcado por tamaño
- Suministrados en bolsa de polietileno

10800-532 Espéculos auriculares reutilizables Ø 2,0 mm, paquete de 10 unidades	10800-533 Espéculos auriculares reutilizables Ø 3,0 mm, paquete de 10 unidades
10800-534 Espéculos auriculares reutilizables Ø 4,0 mm, paquete de 10 unidades	10800-535 Espéculos auriculares reutilizables Ø 5,0 mm, paquete de 10 unidades
10800-539 Espéculos nasales reutilizables Ø 9,0 mm, paquete de 10 piezas	



Espéculos desechables para L3

- Para un solo uso: una opción higiénica para prevenir la contaminación cruzada
- Fabricados en plástico negro, cada espéculo claramente marcado por tamaño
- Suministrados en bolsa de polietileno

10801-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 100 unidades	10802-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 500 unidades
10803-532 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 1000 unidades	10801-533 Espéculos auriculares desechables Ø 3,0 mm, paquete de 100 unidades
10802-533 Espéculos auriculares desechables Ø 2,0 mm, paquete de 500 unidades	10803-533 Espéculos auriculares desechables Ø 3,0 mm, paquete de 1000 unidades
10801-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 100 unidades	10802-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 500 unidades
10803-534 Espéculos auriculares desechables Ø 4,0 mm, paquete de 1000 unidades	10801-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 100 unidades
10802-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 500 unidades	10803-535 Espéculos auriculares desechables Ø 5,0 mm, paquete de 1000 unidades
10801-539 Espéculos nasales desechables Ø 9,0 mm, paquete de 100 piezas	10802-539 Espéculos nasales desechables Ø 9,0 mm, paquete de 500 piezas
10803-539 Espéculos nasales desechables Ø 9,0 mm, paquete de 1000 piezas	

ACCESORIOS



Lente de operación

- › Cristal óptico con un diámetro interno pequeño para la inserción de instrumentos
- › Aumento de 4x
- › Con conector de clavija
- › Para uso con otoscopios L2 y L3

11449 Lente de operación para otoscopio **ri-scope®** L



Espejos laríngeos

- › Para conductor de luz **ri-scope®** F.O.
- › Dos espejos laríngeos N° 3 (Ø 20 mm / 0,79 in) y N° 4 (Ø 22 mm / 0,87 in) para iluminación y visualización del área laríngea
- › Fácilmente acoplables al conductor de luz

10447 1 par de espejos laríngeos, 2 piezas



Lupa

- › Para oftalmoscopio **ri-scope®** L
- › Lupa independiente con aumento de 5x

10965 Lupa independiente para oftalmoscopio **ri-scope®** L



Lupa giratoria

- › Para espéculo nasal **ri-scope®** F.O.
- › Aumento de 2,5x
- › Con conector de clavija

11564 Lupa giratoria para espéculo nasal **ri-scope®** F.O.



Placa de contacto

- › Compatible con dermatoscopio **ri-derma**
- › Hay disponibles dos placas de contacto amigables con la piel:
 - Con escala (0 – 10 mm) para medición precisa de lesiones pigmentadas
 - Sin escala

10968 Placa de contacto sin escala para **ri-derma**

10969 Placa de contacto con escala para **ri-derma**



Pera para prueba neumática

- › Compatible con todos los otoscopios **Riester**
- › Para el diagnóstico de trastornos del oído medio
- › Permite una exploración óptima del tímpano mediante presión de aire
- › No se necesita conector: la pera neumática se conecta directamente a través del puerto integrado en el lateral de la cabeza del instrumento

10960 Pera para prueba neumática

Visite **riester.de** para más información



Rudolf Riester GmbH P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | 72417 Jungingen | Alemania
Tel.: (+49) 7477-9270-0 | Fax.: (+49) 7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

